

# Phosphatesmo MI

## Test strip for the determination of alkaline phosphatase in milk

en

Phosphatesmo MI is a valuable auxiliary for a quick check of correct pasteurization of milk.

### Pack content:

1 aluminum container with 50 test strips  
50 PE bags

### General indications:

Remove only as many test strips as are required. Close the container immediately after removing a strip. Do not touch the test field.

### Instructions for use:

1. Dip test strip briefly into the milk.
2. Shake of excess liquid.
3. In order to prevent the test pad of the test strip from drying out, place the test strip in the enclosed PE bag. Use a new bag for each test to avoid cross-over contamination.
4. Incubate the test strip at 36 °C for 1 h.

### Interpretation:





In the presence of alkaline phosphatase the test field turns yellow. The incubation can now be stopped. For control measurement use raw milk and heated milk. A yellow coloration indicates, that raw milk is present or the milk was not sufficiently heated. No coloration indicates that the pasteurization was correctly completed.

### Limit of sensitivity:

Limit of sensitivity: 0.5% raw milk in pasteurized milk

### Storage:

Avoid exposing the test strips to direct sunlight and moisture. Store the container in a cool and dry place (**storage temperature: +2° to +8 °C**). If correctly stored, the test strips may be used until the use-by-date printed on the packaging.

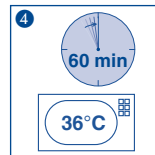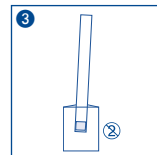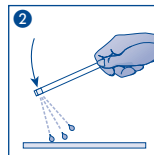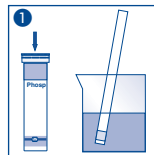

Artikelnummer / Item number / Référence produit / Referencia / Artikelnummer / Numero di catalogo / Numer artykułu	Chargencode / Batch identification / Numéro de lot / Código de lote / Produktionummer / Codice del lotto / Numer partii
Achtung! / Warning! / Attention! / ¡Atención! / Let op! / Attenzione! / Uwaga!	Verwendbar bis / Use by / À utiliser avant / Fecha de caducidad / Te gebruiken tot / Utilizzare entro (anno / mese) / Przydatność do użycia
Temperaturbegrenzung / Permitted storage temperature range / Limites de température / Limites de temperatura / Temperatuurbegrenzung / Limite de tem- peratura / Ograniczenie temperatury	Trocken aufbewahren / Store in a dry place / Conserver au sec / Mantener seco / Op een droge plaats bewaren / Mantenero asciutto / Przechowywać w suchym miejscu
Gebrauchsanweisung beachten / Please read instructions for use / Respecter les instructions d'utilisation / Obsérvense las instrucciones de uso / Lees de bijsluiters / Consultare le istru- zioni per l'uso / Przestrzegać instrukcję użycia	Packung geschlossen halten / Keep container closed / Refermer la boîte / Mantenga el envase cerrado / Verpak- king gesloten houden / Conservare la confezione chiusa / Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty
Ausreichend für <n> Prüfungen / Contains sufficient for <n> tests / Contenu suffisant pour <n> tests / Contenido suficiente para <n> tests / Voldoende voor <n> tests / Contenu sufficiente per <n> test / Wystarczająco dla kontroli <n>	